SalvafiX®

Restraint and positioning
Contención y posicionamiento



SECURE THERAPEUTIC RESTRAINT SYSTEM

SISTEMA DE CONTENCIÓN TERAPÉUTICA SEGURA


Memory *PRO* · Standard · Slim · Transit

SalvafiX

Patient's rights and needs in the 21st century require innovative and effective solutions to guarantee the safety and respect of their dignity. SALVAFIX is the result of constant research in which many healthcare professionals are involved and it is adapted taking into account the recommendations of several international agencies for surveillance and control of medical devices. SALVAFIX is recognized and recommended by the healthcare professionals as one of the most reliable, safe and comfortable preventative systems of therapeutic restraint and as respectful to the patient.

Las necesidades y derechos de los pacientes del siglo XXI requieren de soluciones innovadoras y eficaces que garanticen la seguridad y respeten su dignidad. SALVAFIX es fruto de la investigación constante en la que participan numerosos profesionales de la salud y adaptándose a las recomendaciones de las diferentes agencias internacionales de vigilancia y control de productos sanitarios. SALVAFIX es reconocido y recomendado por los profesionales sanitarios como uno de los sistemas preventivos de contención terapéutica más fiable, seguro, cómodo y respetuoso con el paciente.


Labeling

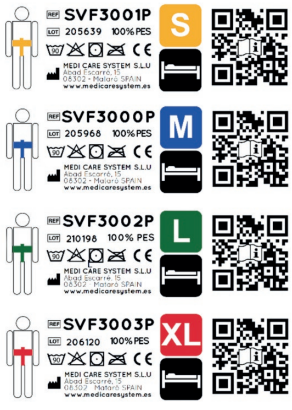




Reinforced structure in all of the sensitive areas where there are increased efforts.

Estructura reforzada en todas las zonas susceptibles de sufrir esfuerzos elevados.

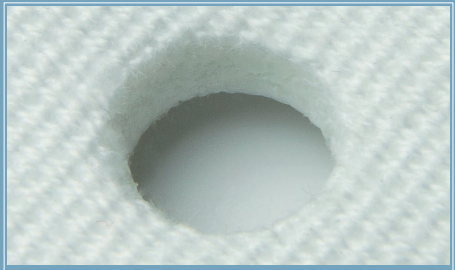

Ultrasound sealed eyelet holes to avoid tears.

Ollaos sellados por ultrasonidos para evitar desgarros.

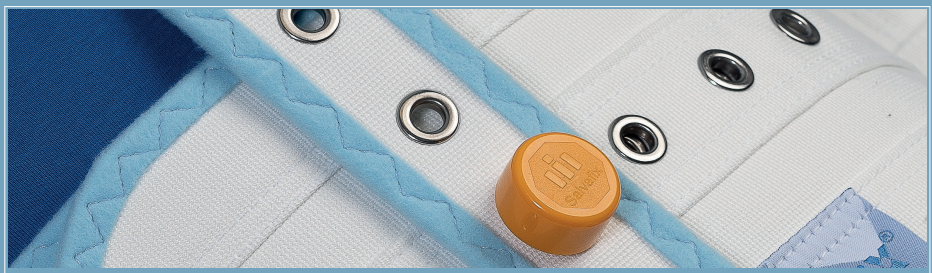

Smoothly padded edging and reinforced that prevent patient injuries.

Ribetes con costura reforzada, acolchados y suaves que evitan lesiones en el paciente.

The stainless steel eyelets are highly resistant to tear and moisture, providing more strength.

Los ollaos de acero inoxidable aportan robustez y son altamente resistentes al desgarro y la humedad.



Velcro® to facilitate a fast and secure application.

Velcro® para facilitar una rápida y segura aplicación.



Edging color: blue (sky) to upper parts and brown (ground) to lower parts.

Color del ribete: azul (cielo) para partes superiores y marrón (tierra) para inferiores.

CERTIFIED PERMANENT
ANTIMICROBIAL PROTECTION
PROTECCIÓN ANTIBACTERIANA PERMANENTE CERTIFICADA



- Proven 99.99% efficiency avoiding cross-contamination risks
  Eficacia demostrada del 99,99% que evita riesgos de contaminación cruzada
- Silver ion technology suitable for medical use
  Tecnología de iones de plata apto para uso médico

Biomaster PROTECTED


ISO 22196:2011 Antimicrobial Test Certificate

This is to certify that

SVF3500 Salvafix safety lock / SVF3505 Salvafix safety lock

treated with 2% Biomaster 408

supplied by **Medicare System**

has been tested to ISO 22196:2011 standards and shown to reduce
MRSA by ≥ 99.85 %
Escherichia coli by ≥ 99.33%

Date of test: 29th February 2020
Test laboratory: Industrial Microbiological Services Limited
Registered in England 3064423

Certificate Number: 10391/85.91/13643

Dr Sue Bethel
Technical Manager

Biomaster ISO22196:2011

Permanent antimicrobial protection for your products

The SVF3500 and SVF3505 magnetic opening buttons are made of a material that incorporates the Biomaster 408 additive in its composition, which provides antibacterial properties throughout the useful life of the product. It has been tested according to ISO 22196:2011 standards in addition to environmental controls and is effective against fungi, mold and 99.99% of bacteria, even those resistant to antibiotics such as Staphylococcus aerial (MRSA) and Enterococcus resistant to vancomycin (VRE).

Los botones de apertura magnética SVF3500 y SVF3505 están fabricados con un material que incorpora en su composición el aditivo Biomaster 408, el cual aporta propiedades antibacterianas durante toda la vida útil del producto. Ha sido testado según los estándares ISO 22196:2011, además de controles medioambientales y es eficaz contra hongos, moho y el 99,99% de las bacterias, incluso las resistentes a antibióticos como es Estafilococo aéreo (MRSA) y los Enterococcus resistentes a la vancomicina (VRE).



View codes and sales units in p. 26/*Ver códigos y unidades de venta en pág. 26*

LOCKING SYSTEMS

SISTEMAS DE CIERRE SEGURO

Magnetic opening

Apertura magnética



Standard / *Estándar**

For general use. Resists up to 150 kg. Included as standard.

Para uso general. Con resistencia de hasta 150 kg. Incluído de serie.





Waterproof

Robust magnetic button whose function is not altered in wet conditions. Resists up to 300 kg.

Robusto botón magnético cuya funcionalidad no se ve alterada en mojado. Con resistencia de hasta 300 kg.





Aluminium / *Aluminio**

For intensive use (psychiatric, emergency, etc.) Resists up to 400 kg.

Para uso intensivo (psiquiatría, urgencias, etc.) Con resistencia de hasta 400 kg.





The "Blue Key"

Magnetic key with **centering ring** for easy positioning on the button and speed up the opening. With **neodymium magnet**, up to 6x more powerful than a ferrite magnet and more durable because they do not lose particles. Ensures quick release of the button.

*Llave magnética con **aro centrador** para facilitar su posicionamiento y agilizar la apertura. Incorpora un **imán de neodimio**, hasta 6 veces más potente que uno convencional de ferrita y mucho más duradero, pues no pierde partículas. Asegura una apertura rápida del botón.*

Mechanical opening

Apertura mecánica



Mechanical / *Mecánico*

The system of highest resistance (up to 600 kg.) Water resistant.

El sistema de más alta resistencia (hasta 600 kg.) Resistente al agua.





Mechanical key / *Llave mecánica*

Made of stainless steel. Designed for quick and safe opening of the mechanical button. It works under any conditions.

De acero inoxidable. Diseñada para una rápida y segura apertura del botón mecánico. Funciona bajo cualquier condición de uso.

* Don't work if wet / *No funciona en condiciones de mojado.*

SalvafiX®
Memory *PRO*

Makes the application easier and increases the security and control, avoiding risks for the patient due to too strong tightenting or for the medical staff due to having it too loose. The **alphanumeric coding** is a patented system to make the product application easier, quicker and safer. Allows tracking of abdominal measurement changes and memorizes the suitable alphanumeric setting for each patient. The **Controlled Mobility System** allows to widen or restrain, in a secure way, the grade of mobility according to the person requeriments.

*Simplifica la aplicación y aumenta la seguridad y control, evitando riesgos para el paciente por excesivo ajuste o para el personal sanitario por demasiada holgura. El **código alfanumérico** es un sistema patentado que permite aplicar el producto de una manera más fácil, rápida y segura. Permite detectar cambios en la medida abdominal y memorizar la configuración alfanumérica adecuada para cada paciente. Además, garantiza el control de la simetría al aplicarse en ambas extremidades. El **Sistema de Movilidad Controlada** permite ampliar o restringir de forma segura el grado de movilidad según requiera la persona.*











Abdominal belt

Cinturón abdominal

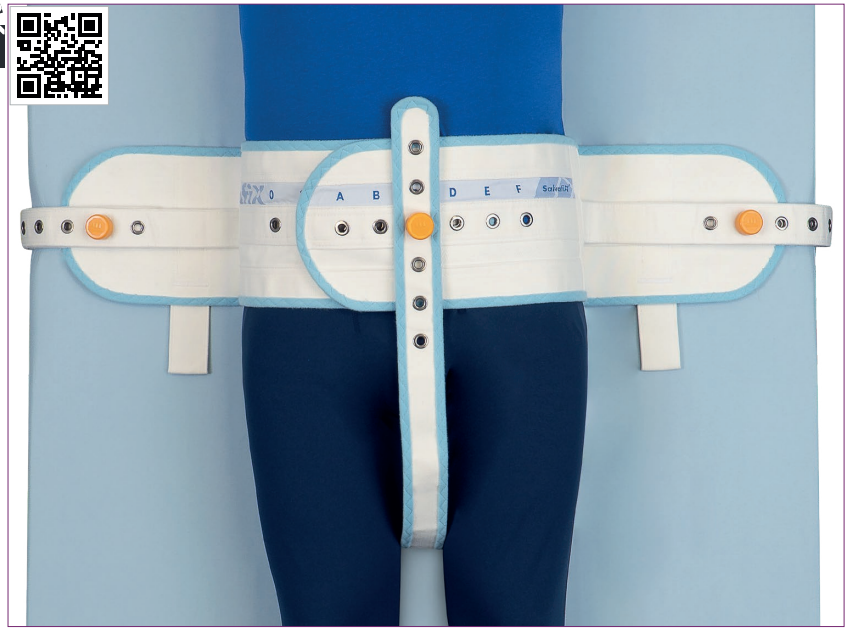

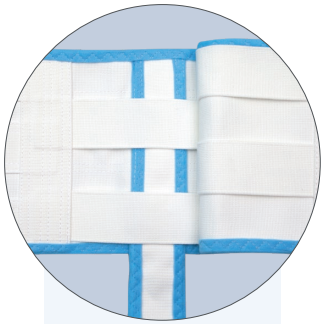

Perineal band sewn to te belt

Banda perineal cosida al cinturón



L and XL sizes: two buttons for safety

Tallas L y XL: dos cierres por seguridad

The SALVAFIX Memory Pro abdominal control belts include an articulated system (except size XL) that allows the patient to turn on to either side, be incorporated or sit on the bed. Installation in bed is simple. The sidebands prevent the patient from rotating around the axis of the belt. Perineal band prevent the patient from rotating inside the belt and from the risk of suffocation by sliding down.

Los cinturones de control abdominal SALVAFIX Memory Pro incluyen un sistema articulado (excepto talla XL) que permite al paciente girar hacia ambos lados, incorporarse o sentarse en la cama. Su instalación en cama es sencilla. Las bandas laterales evitan que el paciente gire sobre el eje del cinturón. La banda perineal evita la rotación del paciente dentro del cinturón y el riesgo de asfixia por deslizamiento hacia abajo.

Code/*Código*	Size/*Talla*	Perimeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*
SVF3001P	S	46 - 76 cm	16 cm
SVF3000P	M	68 - 108 cm	18 cm
SVF3002P	L	95 - 135 cm	18 cm
SVF3003P	XL	115 - 150 cm	18 cm


- **1** belt with sewn lateral bands
  cinturón con bandas laterales cosidas
- **3** locks (sizes L and XL: 4 locks)
  cierres (tallas L y XL: 4 cierres)
- **1** magnetic key / *llave magnética*
  Blue Key









Lateral bands
Bandas laterales

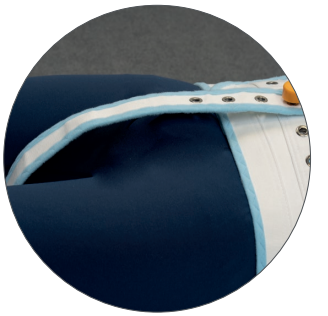


Antislip perineal band
Banda perineal antideslizamiento

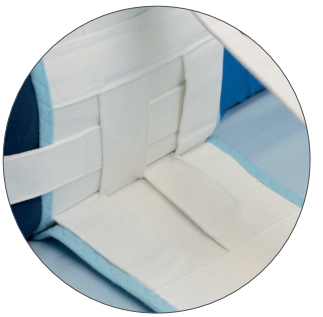

Articulation
Articulación

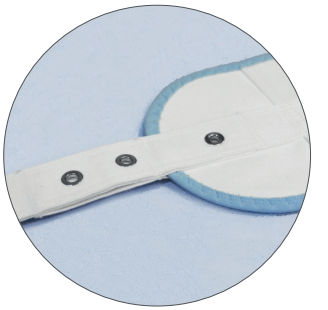

Adaptable to different width of beds
Adaptación a varios anchos de cama

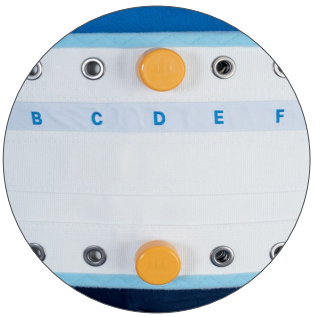

Double eyelets in XL size
Doble fila de ollaos en talla XL



Friendly label and instruction manual by QR
Iconos de ayuda e instrucciones por QR


Wristbands

Muñequeras







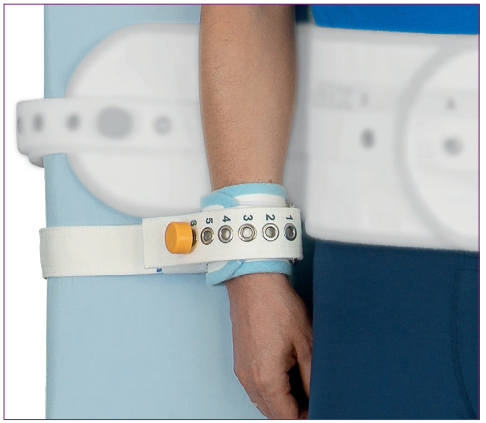



The SALVAFIX Memory Pro wristbands allow to secure the patient's hands to the bed. These are fixed to the bed structure by a long adjustable band.

1. The **Controlled Mobility System** works combined with the abdominal belt, passing the wristband band through the lower belt loop, thus limiting the movements outside the perimeter of the bed.
2. The inside of the wristbands is made of a soft touch padding, preventing pressure sores or abrasions.
3. The wristbands contains an area with Velcro® that allows faster and tight application, increasing system security.

Las muñequeras SALVAFIX Memory Pro permiten asegurar las manos del paciente a la cama. Se fijan al bastidor de la cama mediante una banda larga regulable en longitud.

1. *El **Sistema de Movilidad Controlada** funciona combinado con el cinturón abdominal, pasando la banda de la muñequera por la presilla inferior del cinturón, limitando así los movimientos fuera del perímetro de la cama, siempre que se utilice en combinación con el cinturón abdominal.*
2. *El interior de las muñequeras está fabricado con un material acolchado de tacto suave, que evita lesiones por presión o abrasión.*
3. *Las muñequeras contienen una zona con Velcro® que permite realizar una aplicación más rápida y ajustada, incrementando así la seguridad del sistema.*

Code/*Código*	Size/*Talla*	Perimeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*
SVF3251	S	9 - 15 cm	8 cm
SVF3250	M	14 - 20 cm	8 cm
SVF3252	L	19 - 25 cm	8 cm
SVF3253	XL	24 - 30 cm	8 cm

- **2** wristbands */ muñequeras*
- **4** locks */ cierres*
- **1** magnetic key */ llave magnética*
  Blue Key

Ankle bands

Tobilleras



The SALVAFIX Memory Pro ankle bands allow to secure the patient's feet to the bed. The set consists of a strap fixed to the bed structure and two independent ankle bands that are fixed to the bed by locks.

1. The **Controlled Mobility System** incorporated to the ankle bands allows to adjust the levels of restraint to the clinical needs of the patient.
2. The inside of the ankle bands is made of a soft touch padding, preventing pressure sores or abrasions.
3. The ankle bands contain an area with Velcro® that allows faster and tight application, increasing system security.

Las tobilleras SALVAFIX Memory Pro permiten asegurar los pies del paciente a la cama. El conjunto lo compone una cincha fijada al bastidor de la cama y dos tobilleras independientes que se ajustan a la cincha de cama mediante cierre seguro.

1. *El **Sistema de Movilidad Controlada** que incorporan las tobilleras permite regular el rango de movimiento según las necesidades clínicas del paciente.*
2. *El interior de las tobilleras está fabricado con un material acolchado de tacto suave, que evita lesiones por presión o abrasión.*
3. *Las tobilleras contienen una zona con Velcro® que permite realizar una aplicación más rápida y ajustada, incrementando así la seguridad del sistema.*

Code/*Código*	Size/*Talla*	Perimeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*
SVF3351	S	14 - 20 cm	8 cm
SVF3350	M	19 - 25 cm	8 cm
SVF3352	L	24 - 30 cm	8 cm
SVF3353	XL	29 - 35 cm	8 cm

- **2** ankle bands */ tobilleras*
- **1** bed strap for ankle bands */ cincha de sujeción a la cama*
- **4** locks */ cierres*
- **1** magnetic key */ llave magnética*
  Blue Key

1



2



3



Harness with thorax band

Arnés con banda para tórax

Prevents the patient from slipping vertically up, and is highly flexible in its application. A band around the thorax prevents the patient from slipping and loosen the harness. This product comes with a transversal strap which s prevents any violent or immediate incorporation so that the patient cannot injure himself or others. For non violent patients, this harness can be used without the transversal strap. This way the patient obtains a higher grade of mobility and is able to sit up on the bed but not to slip up.

Evita que el paciente se deslice verticalmente hacia arriba y es muy versátil en su aplicación. Una cinta alrededor del tórax impide que pueda deslizarse y liberarse del arnés. El producto incluye una banda transversal cuyo uso impide la incorporación violenta e inmediata, de manera que no se lesione a sí mismo ni a otras personas. Se puede utilizar este arnés sin la banda transversal para obtener un grado de movilidad más alto, con lo que el paciente se puede incorporar en la cama, pero no deslizarse hacia arriba.



fixed to the belt / *con fijación a cinturón*

Code/*Código*	Size/*Talla*	Width/*Ancho*	Perimeter/*Perímetro*
SVF3431	S	5 cm	50 - 90 cm
SVF3430	M/L	5 cm	70 - 126 cm
SVF3433	XL	5 cm	109 - 165 cm

- **1** harness with thorax band / *arnés con banda de tórax*
- **1** bed strap / *cincha de sujeción a la cama*
- **1** short belt strap / *banda corta de sujeción al cinturón*
- **4** locks / *cierres*
- **1** magnetic key / *llave magnética*
  Blue Key




not fixed to the belt / *sin fijación a cinturón*

Code/*Código*	Size/*Talla*	Thorax width/*Ancho tórax*	Perimeter/*Perímetro*
SVF3441	S	8 cm	40 - 80 cm
SVF3440	M/L	8 cm	75 - 115 cm
SVF3443	XL	8 cm	105 - 145 cm

- **1** harness with thorax band and two bed straps / *arnés con banda de tórax y dos cinchas de sujeción a la cama*
- **5** locks / *cierres*
- **1** magnetic key / *llave magnética*
  Blue Key

Complete set

Equipo completo

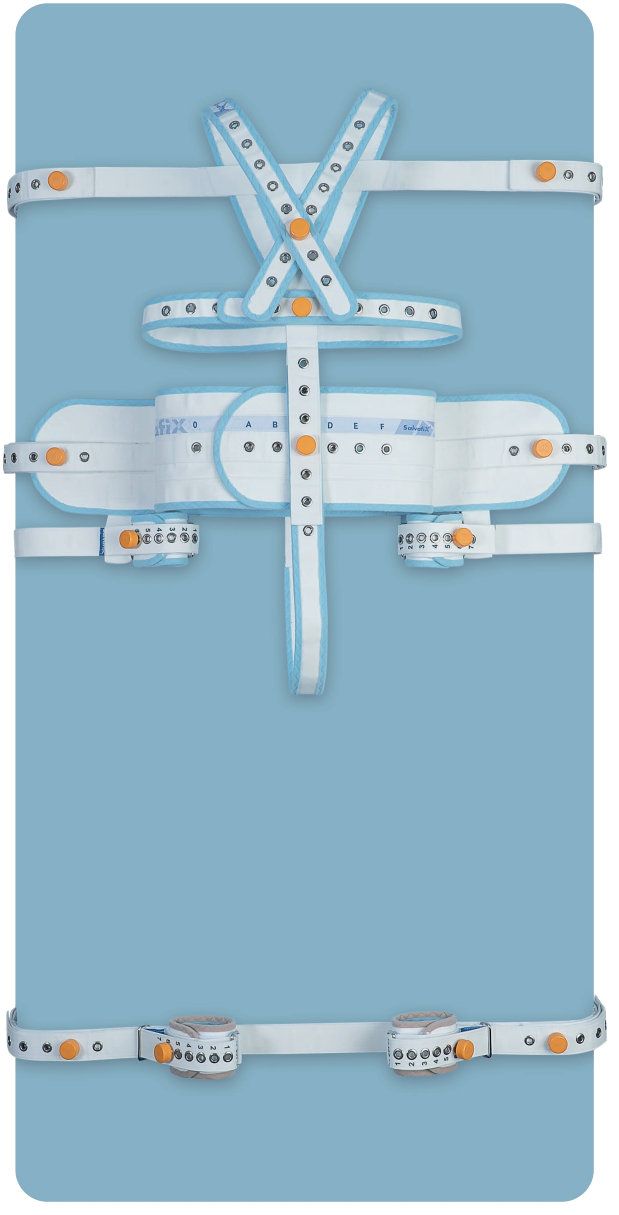

The complete set is the global solution of secure restraint for bedridden patients. It permits having the maximum level of security of the patient and the medical staff, as bed restraint is not an easy issue. As it consists of individual elements, it can be used as required by the patient.

El equipo completo es la solución global de contención segura para pacientes en cama. Permite elevar al máximo el nivel de seguridad del paciente y del personal asistencial. Dado que se compone de elementos individuales, se pueden utilizar según necesidad de la persona.

Code/*Código*	Size/*Talla*
SVF3151P	S
SVF3150P	M
SVF3152P	L
SVF3153P	XL

- **1** belt with sewn lateral bands
  cinturón con bandas laterales cosidas
- **2** wristbands */ muñequeras*
- **2** ankle bands */ tobilleras*
- **1** bed strap for ankle bands
  cincha de sujeción a la cama para tobilleras
- **1** harness with thorax band
  arnés con banda de tórax
- **1** bed strap for harness
  cincha de sujeción a la cama para arnés
- **15** locks (16 for L and XL)
  cierres (16 para L y XL)
- **4** magnetic keys */ llaves magnéticas*
  Blue Keys
- **1** carry bag */ bolsa de transporte*



Complete set


Equipo completo









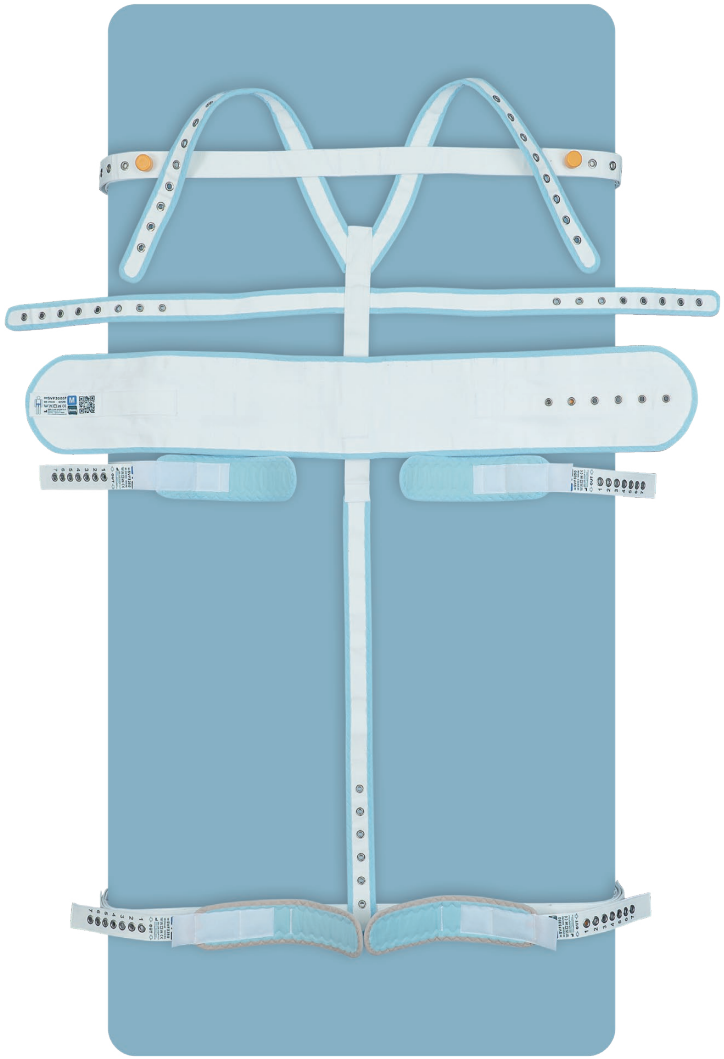


SalvafiX®
Standard


The STANDARD range enables a secure and versatile restraint. Products are made with highly resistant materials, have a functional design and are comfortable.


La gama STANDARD permite una contención segura y versátil. Productos fabricados con materiales muy resistentes, de diseño funcional y confortables.

Abdominal belt

Cinturón abdominal

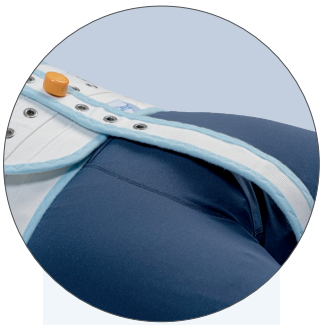

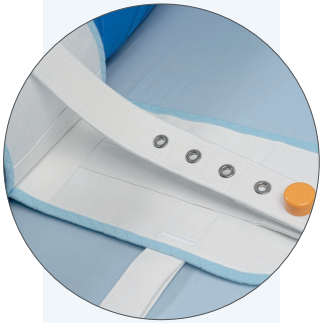

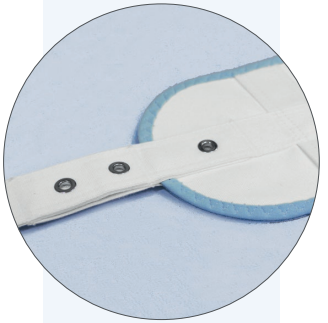



The abdominal restraint belt can be installed before or after the patient lies down on the bed. The lower part, with fixing straps and two tabs, has to be fixed to the bed (always on moving parts) structure; the upper part has to be placed around the patient's waist. The lateral restraining bands must always be applied and used and they are intended to control or prevent the patient from rolling in excess to the right or to the left, and let the appropriated postural changes be made.

El cinturón de sujeción abdominal se puede instalar antes o después de que el paciente se haya acostado. La parte inferior, con cinchas de sujeción, se fija a la estructura de la cama (siempre en partes móviles), la superior se coloca alrededor de la cintura del paciente. Las bandas de sujeción lateral deben aplicarse y usarse siempre y sirven para controlar o fijar el giro a derecha o izquierda y permiten realizar los cambios posturales pertinentes.

Code/*Código*	Size/*Talla*	Perimeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*
SVF3031P	S	46 - 76 cm	16 cm
SVF3030P	M	68 - 108 cm	18 cm
SVF3032P	L	95 - 135 cm	18 cm

- **1** belt with sewn lateral bands
  cinturón con bandas laterales cosidas
- **3** locks (size L: 4 locks) */ cierres (talla L: 4 cierres)*
- **1** magnetic key */ llave magnética*
  Blue Key

Wristbands

Muñequeras



Short

Cortas

Its particular design permits a comfortable application only to the belt tab.

Su particular diseño permite una cómoda aplicación solamente en las presillas del cinturón.

Code/*Código*	Size/*Talla*	Perimeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*
SVF3221	S	9 - 15 cm	8 cm
SVF3220	M	14 - 20 cm	8 cm
SVF3222	L	19 - 25 cm	8 cm

- **2** wristbands *muñequeras*
- **2** locks */ cierres*
- **1** magnetic key *llave magnética* Blue Key



Long


Largas

Designed to be applied without a belt, anchored to the bed frame.

Concebidas para ser aplicadas sin necesidad de cinturón, con anclaje al bastidor de la cama.

Code/*Código*	Size/*Talla*	Perimeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*
SVF3260	M/L	14 - 25 cm	8 cm

- **2** wristbands *muñequeras*
- **4** locks */ cierres*
- **1** magnetic key *llave magnética* Blue Key

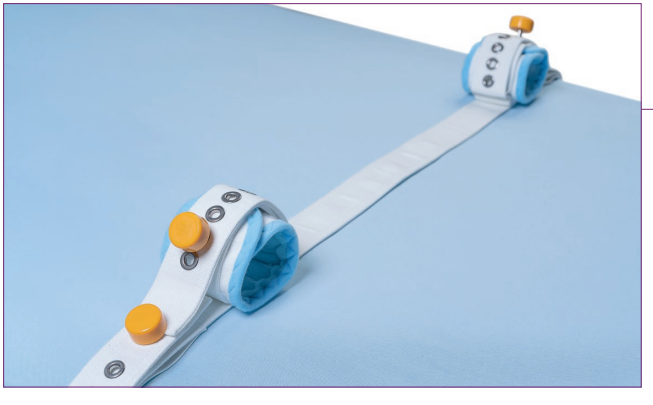

Monoblock

Wristbands sewn to the bed band in a single piece.

Muñequeras cosidas a la banda de cama formando una única pieza.

Code/*Código*	Size/*Talla*	Perimeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*
SVF3231	S	9 - 15 cm	8 cm
SVF3230	M	14 - 20 cm	8 cm
SVF3232	L	19 - 25 cm	8 cm

- **2** wristbands sew *muñequeras cosidas*
- **4** locks */ cierres*
- **1** magnetic key *llave magnética* Blue Key

Universal Duo

Versatile and universal size restraint valid for use on wrists and/or ankles.

Versátil contención de talla universal válida para su aplicación en muñecas y/o tobillos.

Code/*Código*	Size/*Talla*	Perímeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*
SVF3800	Universal	10 - 34 cm	8 cm

- **1** pair of DUO */ par de DUO*
- **4** locks */ cierres*
- **1** magnetic key */ llave magnética*
  Blue Key



Ankle bands

Tobilleras

The SALVAFIX Standard ankle bands allow to secure the patient's feet. The comfortable softly padded covering eliminates the injuries caused by pressure or abrasions. The Velcro® prevents slipping of the overlapped parts.

Las tobilleras SALVAFIX Standard permiten asegurar los pies del paciente. El confortable acolchado envolvente y de tacto suave elimina posibles lesiones por presión o abrasión. El Velcro® impide el deslizamiento de las partes solapadas.



Code/*Código*	Size/*Talla*	Perimeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*
SVF3321	S	14 - 20 cm	8 cm
SVF3320	M	19 - 25 cm	8 cm
SVF3360	M/L	18 - 28 cm	8 cm
SVF3322	L	24 - 30 cm	8 cm

- **2** ankle bands sewn */ tobilleras cosidas*
- **4** locks */ cierres*
- **1** magnetic key */ llave magnética*
  Blue Key

Harness

Arnés



The fastening thoracic harness is used to prevent the patient from slipping vertically.

El arnés de sujeción torácica se utiliza para evitar que el paciente pueda desplazarse verticalmente.

Code/*Código*	Size/*Talla*	Width/*Ancho*
SVF3400	One/*Única*	5 cm

- **1** harness */ arnés*
- **1** bed strap */ cincha de sujeción a la cama*
- **1** short belt strap */ banda corta de sujeción al cinturón*
- **3** locks */ cierres*
- **1** magnetic key */ llave magnética*
  Blue Key

Thigh bands

Musleras



The SALVAFIX Standard thigh bands allow secure the patient´s legs.

Las musleras de sujeción SALVAFIX Standard permiten asegurar las piernas del paciente.

Code/*Código*	Size/*Talla*	Perimeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*
SVF3600	One/*Única*	32 - 62 cm	8 cm

- **2** thigh bands sewn to the bed strap
  musleras cosidas a la banda de la cama
- **4** locks */ cierres*
- **1** magnetic key */ llave magnética*
  Blue Key

Complete set

Equipo completo


This set permits having the maximum level of security of the patient and the medical staff. As it consists of individual parts, it can be used depending on the need at that moment.

Este equipo permite elevar al máximo el nivel de seguridad del paciente y del personal médico. Dado que se compone de elementos individuales se pueden utilizar según necesidad en el momento.

Code/*Código*	Size/*Talla*
SVF3121P	S
SVF3120P	M
SVF3122P	L

- **1** belt with sewn lateral bands
  cinturón con bandas laterales cosidas
- **2** wristbands */ muñequeras*
- **2** ankle bands */ tobilleras*
- **1** bed strap for ankle bands
  cincha de sujeción a la cama para tobilleras
- **1** harness */ arnés*
- **1** bed strap for harness
  cincha de sujeción a la cama para arnés
- **12** locks (13 for L) */ cierres (13 para L)*
- **4** magnetic keys */ llaves magnéticas*
  Blue Keys



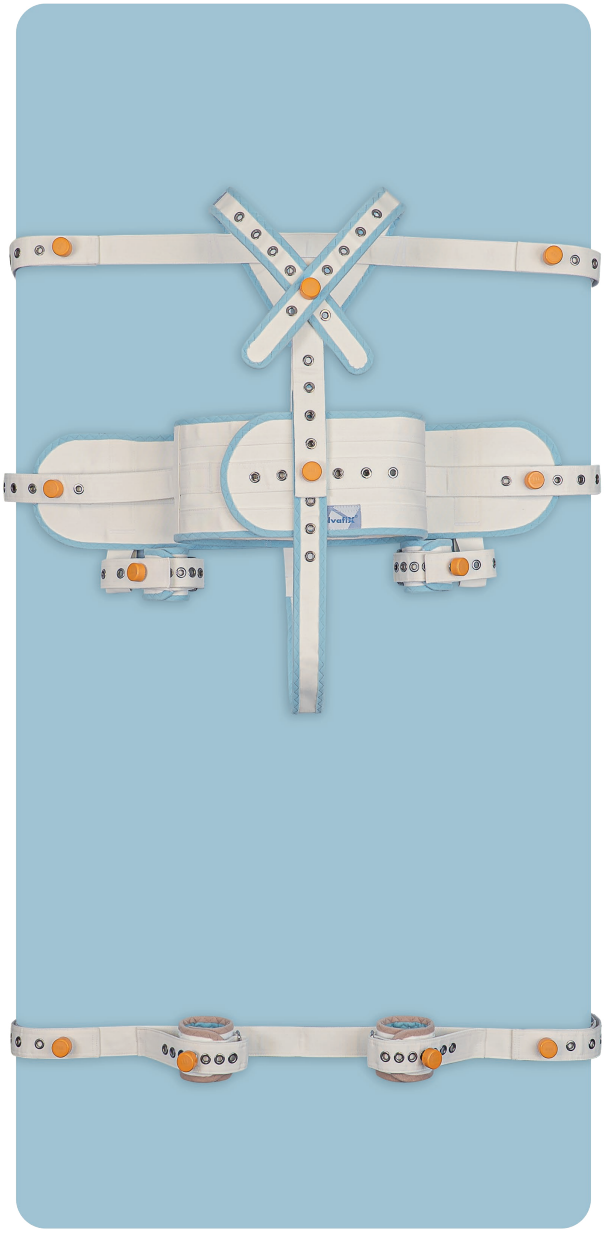

SalvafiX®
Slim

Allows a secure and adapted restraint for slim patients on the bed, wheelchair, chair of armchair. Ideal for home care due to its security, convenience and simplicity.

Permite una contención segura y adaptada a pacientes de complexión delgada en cama, silla de ruedas, silla o sillón. Ideal para la atención domiciliaria por su seguridad, comodidad y sencillez.

Belt for bed

Cinturón para cama

Belt with lateral strips to prevent the patient from rotating around the axis of the belt. The perineal band prevents the patient from rotating inside the belt and from the risk of suffocation by sliding down.

Cinturón con bandas laterales que impiden que el paciente gire sobre el eje del cinturón. La banda perineal impide que el paciente pueda girar sobre si mismo dentro del cinturón o deslizarse hacia abajo, evitando así riesgo de asfixia.



Code/*Código*	Size/*Talla*	Perimeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*
SVF3050P	M	68 - 108 cm	8 cm

- **1** belt with lateral and perineal bands
  cinturón con bandas laterales y perineal
- **3** locks */ cierres*
- **1** magnetic key */ llave magnética*
  Blue Key

Belt for wheelchair, chair or armchair

Cinturón para silla de ruedas, silla o sillón

Model designed for seated patient.

Modelo diseñado para paciente sentado.



Code/*Código*	Size/*Talla*	Perimeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*
SVF3060P	M	68 - 108 cm	8 cm
SVF3062P	L	74 - 114 cm	8 cm

- **1** belt */ cinturón*
- **2** locks */ cierres*
- **1** magnetic key */ llave magnética*
  Blue Key

SalvafiX®
Transit

Restraint system specifically adapted for the transfer of patients on stretchers or through ambulation.

Sistema de contención seguro y adaptado específicamente para el traslado de pacientes en camilla o mediante deambulación.

Harness for stretcher

Arnés para camilla


The thoracic fastening harness is used to avoid the patient from moving vertically. A blue edge sewn on the borders of the straps gives it a soft finish and creates a soft touch padded surface. Its particular monoblock design permits an easy application on the stretcher.

El arnés de sujeción torácica se utiliza para evitar que el paciente pueda desplazarse verticalmente y para evitar que pueda incorporarse. Un ribete azul cosido en el borde de las bandas las dotan de un acabado suave y acolchada para mayor confort del paciente. Su particular diseño monobloque permite una cómoda aplicación sobre la camilla.



Code/*Código*	Size/*Talla*	Perimeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*	Stretcher width/*Ancho camilla*
SVF3470	M/L	70 - 110 cm	8 cm	45 - 60 cm
SVF3476	M/L	80 - 120 cm	8 cm	60 - 80 cm
SVF3478	XL	110 - 150 cm	8 cm	60 - 80 cm

- **1** harness */ arnés*
- **3** locks */ cierres*
- **1** magnetic key
  llave magnética
  Blue Key

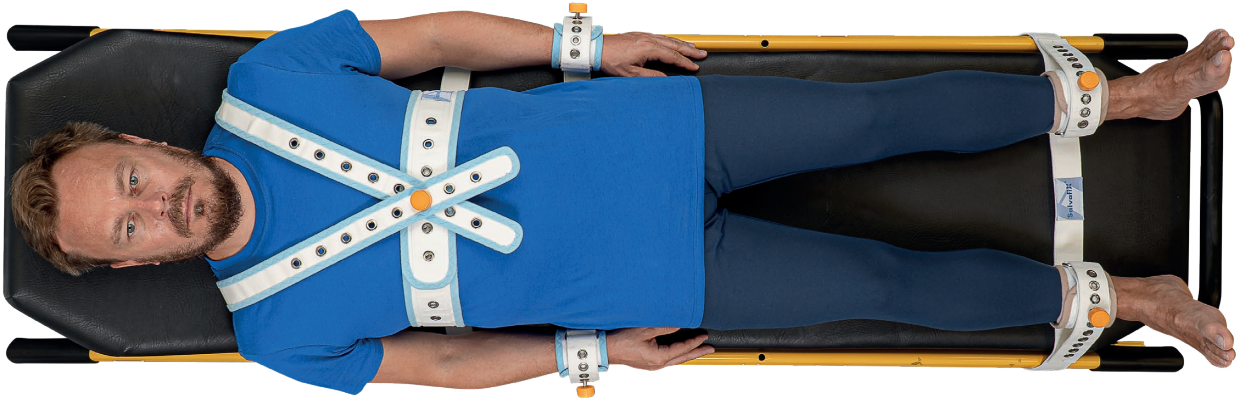

Wristbands for stretcher

Muñequeras para camilla



Wristbands adapted to the stretcher assembly. Its monoblock design permits an easy application on the stretcher.

Muñequeras adaptadas al montaje en camilla. Su diseño monobloque permite una sencilla aplicación.

Code/*Código*	Size/*Talla*	Perimeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*	Stretcher width/*Ancho camilla*
SVF3270	M/L	14 - 25 cm	8 cm	45 - 60 cm
SVF3276	M/L	14 - 25 cm	8 cm	60 - 80 cm
SVF3278	XL	24 - 30 cm	8 cm	60 - 80 cm

- **1** set of wristbands sewn to the stretcher strap
  conjunto de muñequeras cosidas a la cincha para la camilla
- **3** locks */ cierres*
- **1** magnetic key */ llave magnética*
  Blue Key

Ankle bands for stretcher

Tobilleras para camilla



Ankle bands adapted to the stretcher assembly. Its monoblock design permits an easy application on the stretcher.

Tobilleras adaptadas al montaje en camilla. Su diseño monobloque permite una sencilla aplicación.

Code/*Código*	Size/*Talla*	Perimeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*	Stretcher width/*Ancho camilla*
SVF3370	M/L	18 - 28 cm	8 cm	45 - 60 cm
SVF3376	M/L	18 - 28 cm	8 cm	60 - 80 cm
SVF3378	XL	29 - 35 cm	8 cm	60 - 80 cm

- **1** set of ankle bands sewn to the stretcher strap
  conjunto de tobilleras cosidas a la cincha para la camilla
- **3** locks */ cierres*
- **1** magnetic key */ llave magnética*
  Blue Key

Wristbands for ambulation

Muñequeras para deambulación

Set of wristbands sewn onto the belt band. Maintains patient's arms in a comfortable position and avoids aggression, self-injury or any manipulation of locks.
Conjunto de muñequeras cosidas sobre una banda de cintura. Mantiene los brazos del paciente en una posición cómoda y evita agresiones, autolesiones o cualquier manipulación del sistema de cierre.





Back / *trasera*

Code/*Código*	Size/*Talla*	Perimeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*
SVF3280	M/L	14 - 25 cm	8 cm

- **1** set of wristbands / *conjunto de muñequeras*
- **3** locks / *cierres*
- **1** magnetic key / *llave magnética*
  Blue Key

Ankle bands for ambulation

Tobilleras para deambulación

Set of ankle bands sewn on a band that connects them. Allows the patient to walk in short steps.
Conjunto de tobilleras cosidas sobre una banda que las une. El paciente puede desplazarse con pasos cortos.



Code/*Código*	Size/*Talla*	Perimeter/*Perímetro*	Width/*Ancho*
SVF3380	M/L	19 - 30 cm	8 cm

- **1** set of ankle bands / *conjunto de tobilleras*
- **2** locks / *cierres*
- **1** magnetic key / *llave magnética*
  Blue Key

Binding band for wristbands and ankle bands

Banda de unión para muñequeras y tobilleras

Code/*Código*	Lenght/*Longitud*
SVF3480	105 cm

- **1** binding band / *banda de unión*
- **1** lock / *cierres*

Complete set for ambulation

Equipo completo para deambulación




Consists of a set of wristbands sewn onto the belt band, a set of ankle bands and a binding band. Maintains patient's arms and legs in a comfortable position and avoids aggression, self-injury, any manipulation or access to the locks by the patient. Allows the patient to walk in short steps as well as to sit.

Consiste en un conjunto de muñequeras cosidas a una banda de cintura, un conjunto de tobilleras cosidas y una banda de unión. Mantiene los brazos y las piernas del paciente en una posición cómoda y evita la agresión, autolesión, cualquier manipulación o acceso al sistema de cierre por parte del paciente. El paciente puede desplazarse con pasos cortos y no impide que se pueda sentar.




Code/*Código*	Size/*Talla*
SVF3180	M/L

- **1** set of wristbands */ conjunto de muñequeras*
- **1** set of ankle bands */ conjunto de tobilleras*
- **1** binding band */ banda de unión*
- **6** locks */ cierres*
- **2** magnetic keys */ llaves magnéticas*
  Blue Keys

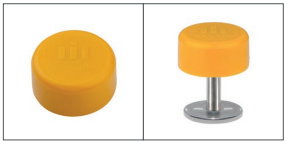


Box of 20 standard buttons
Caja de 20 botones estándar
Code/*Código* SVF3503

Box of 10 standard locks + pin
Caja de 10 botones estándar + pin
Code/*Código* SVF3500

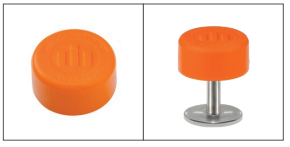

Box of 20 Waterproof buttons
Caja de 20 botones Waterproof
Code/*Código* SVF3508

Box of 10 Waterproof locks + pin
Caja de 10 botones Waterproof + pin
Code/*Código* SVF3505

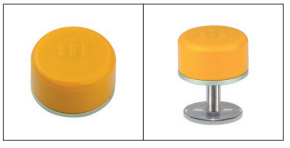

Box of 20 aluminium buttons
Caja de 20 botones aluminio
Code/*Código* SVF3513

Box of 10 aluminium locks + pin
Caja de 10 botones aluminio + pin
Code/*Código* SVF3510



Box of 20 stainless steel pins
Caja de 20 pines de acero inoxidable
Code/*Código* SVF3504



Box of 10 waterproof mechanic locks (button + pin)
Caja de 10 sistemas de cierre mecánicos resistentes al agua (botón + pin)
Code/*Código* SVF3520



For buttons/*Para los botones*
SVF3500 - SVF3510 - SVF3505

Box of 10 Blue Keys
Caja de 10 Blue Keys
Code/*Código* SVF3551



For button/*Para el botón*
SVF3520

Box of 10 mechanic keys
Caja de 10 llaves mecánicas
Code/*Código* SVF3570



SALVAFIX empty carry bag
Bolsa de transporte SALVAFIX vacía
Code/*Código* MT030



SALVAFIX empty briefcase
Maletín SALVAFIX vacío
Code/*Código* MT020



SALVAFIX wash bag
Bolsa de lavado SALVAFIX
Code/*Código*
Size/*Tamaño* 45x60 cm: BAG4560
Size/*Tamaño* 60x90 cm: BAG6090



Emergency box with cutter included
Caja de emergencia con cutter incluído
Code/*Código* SVF3920




Security cutter tool
Herramienta de corte de seguridad
Code/*Código* SVF3900

Disposable security cutter tool
Herramienta de corte desechable
Code/*Código* SVF3910



Extension strap (65 cm)
Banda de extensión (65 cm)
Code/*Código* SVF3460

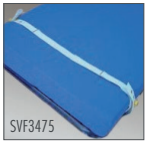

Bed strap for harness **SVF3400**
*Cincha de cama para arnés **SVF3400***
Code/*Código* SVF3448

Bed strap for ankle bands **SVF335***
*Cincha de cama para tobilleras **SVF335****
Code/*Código* SVF3475

Demo case

Maletín de demostración



Demonstration set consisting of a robust branded briefcase containing a complete Salvafix kit.

Material de demostración compuesto por un robusto maletín rotulado que contiene un equipo completo Salvafix.

Code/*Código*	Content/*Contenido*
MT018	SVF3150P
MT019	SVF3120P
MT022	SVF3152P

Training

Formación

Official Partner

evo TRAINING INSTITUTE

https://evotraining.eu



SALVAFIX is one of the safest and most effective restraint systems on the market, thanks to its complete training program for distributors and professional users, allowing them to use the product with agility and security guarantees. Both health center-based and distance training are offered, with an extensive range of audiovisual equipment and learning resources. Continued improvement of the SALVAFIX system makes continued learning the best vehicle for achieving excellence in the product usage.

SALVAFIX es uno de los sistemas de contención más seguros y eficaces del mercado, gracias también a su completo programa de formación a distribuidores y usuarios profesionales, lo que les permite utilizar el producto con agilidad y todas las garantías de seguridad. La formación puede ser presencial o a distancia, con un extenso abanico de material audiovisual y recursos de aprendizaje. El perfeccionamiento continuado del sistema SALVAFIX hace que esta formación sea el mejor vehículo para alcanzar la excelencia en el uso del producto.



For more detailed information on all products see brochure instructions and safety information included with each item. You can also download it using this QR code.

Para una información más detallada de todos los productos, lea el folleto de instrucciones e información de seguridad incluído en cada unidad. También puede descargarlo usando este código QR.

		Memory *PRO*	Standard	Slim	Transit	
Belt *Cinturón*	Articulation / *Articulación*	●	○	○	-	-
	Alphanumeric coding / *Cod. alfanumérica*	●	○	○	-	-
	Size XL / *Talla XL*	●	○	○	-	-
	Fixation / *Anclaje*				-	-
Wristbands *Muñequeras*	Mobility degrees / *Grados de movilidad*	●	●○	-	●	○
	Alphanumeric coding / *Cod. alfanumérica*	●	○	-	○	○
	Size XL / *Talla XL*	●	○	-	○	○
	Fixation / *Anclaje*			-		
Ankle bands *Tobilleras*	Mobility degrees / *Grados de movilidad*	●	○	-	○	○
	Alphanumeric coding / *Cod. alfanumérica*	●	○	-	○	○
	Size XL / *Talla XL*	●	○	-	○	○
	Fixation / *Anclaje*			-		
Harness / *Arnés*	Thorax band / *Banda de tórax*	●	○	-	○	-

MEDICARE SYSTEM
The innocare company

Medicare System products are manufactured according to the directive 93/42/EC of the European Council and are registered with U.S. FDA with nº 3008797789.
Los productos de Medicare System están fabricados conforme a la directiva 93/42/CEE del Consejo Europeo y están registrados en la U.S. FDA con el nº 3008797789.

Medi Care System, S.L.U.
Abat Escarré, 15 · 08302 Mataró (Barcelona) Spain
Phone: +34 937 570 048 · Fax: +34 937 414 068
info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.net

09/21