SALVAFIX Slim

ESPAÑOL




SALVAFIX Slim Cinturón abdominal *para pacientes sentados. Indicado para prevenir las lesiones y caídas de la silla. Se compone de un cinturón con ajuste regulable mediante ollados y una base para la fijación del conjunto a la silla. Ambas piezas están unidas mediante costuras reforzadas sin articulación. Disponible con perineal cosido para impedir que el paciente pueda deslizarse hacia abajo y evitar el riesgo de asfixia.*

Fabricado con cintas de poliéster, refuerzo interior y ollados de acero inoxidable para una mayor resistencia. Ribete de poliéster suave al tacto, para una sujeción confortable y sin rozaduras. Cierres de seguridad compuestos de un pivote de acero inoxidable y un mecanismo con carcasa de ABS/PC. Llave magnética con carcasa de PA e imán de neodimio. El mecanismo se bloquea al insertar el pivote por su orificio y se desbloquea colocando la llave magnética en su cara superior.

CINTURÓN ABDOMINAL SILLA

CARACTERíSTICAS

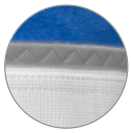

Ribete suave para evitar rozaduras



Código de color por tallas
M (Azul) - L (Verde)

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFIX Slim

NOMBRE DE PRODUCTO: Cinturón abdominal silla

USO PREVISTO: prevenir las autolesiones del paciente y las caidas de la silla

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVFNC

TABLA DE MEDIDAS

Código	Medidas (cm)		
	Talla	Contorno Min./Max.	Ancho
SVF3060P	M	68 / 108	8
SVF3062P	L	74 / 114	8

COLOR

- Blanco natural
- Gris

COMPOSICIÓN

Poliéster
Ollados de acero inoxidable
Anillas de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Usar secadora a baja temperatura
- No planchar

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvafix Slim - Cinturón abdominal silla
- 2 - Cierres de seguridad
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE