ORTOCEL Soft

ESPAÑOL



Bolsa de gel frío/calor indicada para la reducción del dolor y la inflamación en los tratamientos postquirúrgicos y postraumáticos.

Se compone de una emulsión gelatinosa que permite la transmisión de frío y calor. La bolsa frío-calor se mantiene siempre flexible, incluso congelada y puede calentarse en el microondas.

Incluye funda textil para poder aplicarlo en la zona deseada.

COMPRESA GEL FRÍO/CALOR

CARACTERÍSTICAS

- **No tóxico**
- **Incluye funda de tela de protección**
- **Packaging individual**
- **Compatible en microondas**
- **Flexible**

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: ORTOCELSOFT

NOMBRE DE PRODUCTO: Compresa gel frío/calor

USO PREVISTO: Reducción del dolor y la inflamación en los tratamientos postquirúrgicos y postraumáticos

UDI-DI-BASICO: 843603535SOFMP

TABLA DE MEDIDAS

Código	Medidas (mm)
SOF0600	130 x 260

COLOR

- Azul

COMPOSICIÓN


Bolsa: Polietileno/Poliamida
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES FRÍO

- Enfriar la compresa de gel en el congelador durante dos horas como mínimo, antes de utilizarla. Aplicar la compresa sobre la zona deseada envuelta en la funda textil. Una vez utilizada devolver al congelador para futuras aplicaciones.

PRESENTACIÓN

- Estuche: 1 unidad
- Caja: 24 unidades

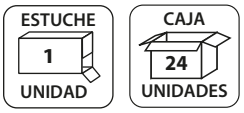

INSTRUCCIONES CALOR

- Baño maría: Calentar la bolsa en un recipiente cubierto de agua hasta el punto de ebullición.
- En microondas: Sumergida en agua, calentar durante 5 minutos a 600W de potencia máxima.
  Aplicar la compresa sobre la zona deseada, envuelta en la funda textil.

ATENCIÓN

- No es conveniente aplicar la compresa de gel directamente sobre la piel.
- La aplicación en frío no debería ser superior a 20 minutos.
- Las personas con problemas circulatorios, deberán consultar a su facultativo antes de usar la compresa frío / calor.
- Esta compresa es para uso externo.
- En caso de rotura, destruya la compresa de gel.
- No ingerir el contenido.
- No dejar al alcance de los niños.
- No tóxico.

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE