SALVAFAST

ESPAÑOL












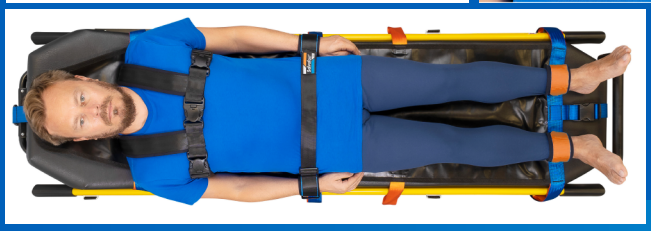



Salvafast Transfer *es un innovador sistema para una rápida y segura contención y transferencia de pacientes alterados, violentos, agresivos o desorientados, para camillas de emergencia.*

Permite, en situaciones de emergencia, la transferencia del paciente a otra camilla o cama sin necesidad de liberar la contención.

Está formado por una resistente base deslizante con un conjunto de arnés, muñequeras y tobilleras con sistema de cierre de doble Velcro®.

Fabricado en una sola pieza y especialmente diseñado para la utilización en todo tipo de camillas de emergencia.

SALVAFAST TRANSFER

CARACTERÍSTICAS

Talla Universal Adaptable a todo tipo de pacientes

45-60

Adaptable a camillas de 45 a 60 cm de ancho

2500N


255Kg

Testado según punto 5.4.1 de UNE-EN1865-1:2010+A1:2015

Equipos para el transporte de pacientes utilizados en ambulancias de carretera.



Arnés con cierres clip de seguridad (3 puntos)

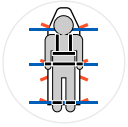

Cintas con código de color:

Fijación camilla

Asas

Fijación paciente



Enrollable para un montaje y almacenaje fácil y rápido (Bolsa incluida)

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFAST

NOMBRE DE PRODUCTO: SALVAFAST Transfer

USO PREVISTO: Contención rápida de pacientes alterados, violentos, agresivos o desorientados.

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVTP8

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)		
	Lona	Muñequeras	Tobilleras
SVT3710	172 x 45	15 - 30	20 - 40

COLOR

Lona:
- Negro
- Naranja

Cintas:
- Azul
- Naranja
- Negro

COMPOSICIÓN

Sujeciones: 80% PES - 20% Neopreno

Lona: 50% PVC - 50% Poliamida

Cierres clip: Acetal (POM)

LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavar el producto a mano después de cada uso con un trapo húmedo y una solución de etanol o isopropanol. El producto permite el uso de desinfectantes de superficies.

- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco





El producto puede ser lavado a máquina hasta 60ºC con detergente desinfectante si se requiere. No obstante, puede agravar el deterioro del producto.

RECOMENDACIONES DE DESINFECCIÓN

- Siga los protocolos de desinfección habituales.
- Use detergente o toallistas desinfectantes de superficies.
- Puede usar soluciones acuosas de etanol o isopropanol, amonio cuaternario (NH_4) o ácido peracético (CH_3CO_3H).
- Se puede usar lejía de forma puntual. En caso de utilizar soluciones de hipoclorito de sodio (HCL) se puede reducir la vida útil del producto.

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvafast Transfer
- 1 - Bolsa de almacenaje

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE